



PRODUCTOS MEDICOS,

ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION

NOTA IMPORTANTE:
La alarma sonora pitara al termino del tiempo elegido para su operación, y la podrá desactivar oprimiendo el botón rojo de INICIO, o bien dejarla que termine su ciclo sonoro

Led verde indicador de encendido del timer




CONTROL

Control de Intensidad

Timer con Alarma

control de intensidad

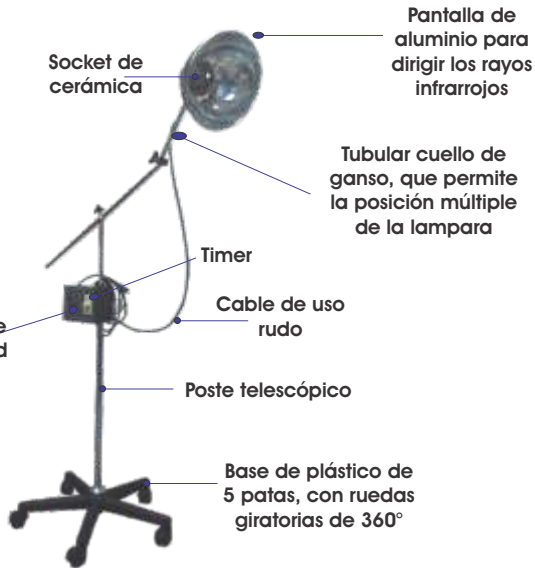

GUÍA DE USO:

A fin de que su lámpara funcione de manera correcta, recomendamos tomar las siguientes precauciones:

- 1-Asegurese de que ninguna pieza se encuentre dañada o falte.
- 2-Coloque su lámpara en una superficie plana y estable, para evitar un mal funcionamiento o inestabilidad de la misma
- 3-Antes de conectarla asegurese de que este apagada y que el enchufe y el voltaje son compatibles.
- 4-Al limpiar su lámpara utilice un paño suave y seco, no use disolventes ni un paño humedo
- 5-Para cambiar el foco desconecte su lámpara y reemplace por otro del mismo tamaño y voltaje
- 6-Debido a que este producto no es a prueba de agua, no deberá ser utilizado o guardado en lugares donde pudiera se salpicada por líquidos, gotas de lluvia, salpicaduras de agua, zumo o café, vapor, transpiración, etc. ya que perjudican el funcionamiento del producto.

Health Group Industrias de México S.A. de C.V.

Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México

C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002

RFC: HGI9711269IA E- Mail: contacto@ortiz.biz



PRODUCTOS MEDICOS,

ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION

TIMER - REFLECTOR,
ALARMA VISUAL Y AUDITIVA



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

LAMPARA LUZ INFRARROJA
MOD. 045TRA

GARANTÍA


Este Producto está garantizado contra defectos de Fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Se aplican restricciones.

PRECAUCIONES: No se garantiza este producto por mal uso y/o intentos de reparación por parte de personas no calificadas.

Para hacer válida su garantía debe presentar: el empaque, el producto, la póliza vigente y comprobante de compra. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor, haga válida su garantía con el mismo.

Servicio a Clientes: 3777-4000

PASOS PARA ENSAMBLAR LAMPARA

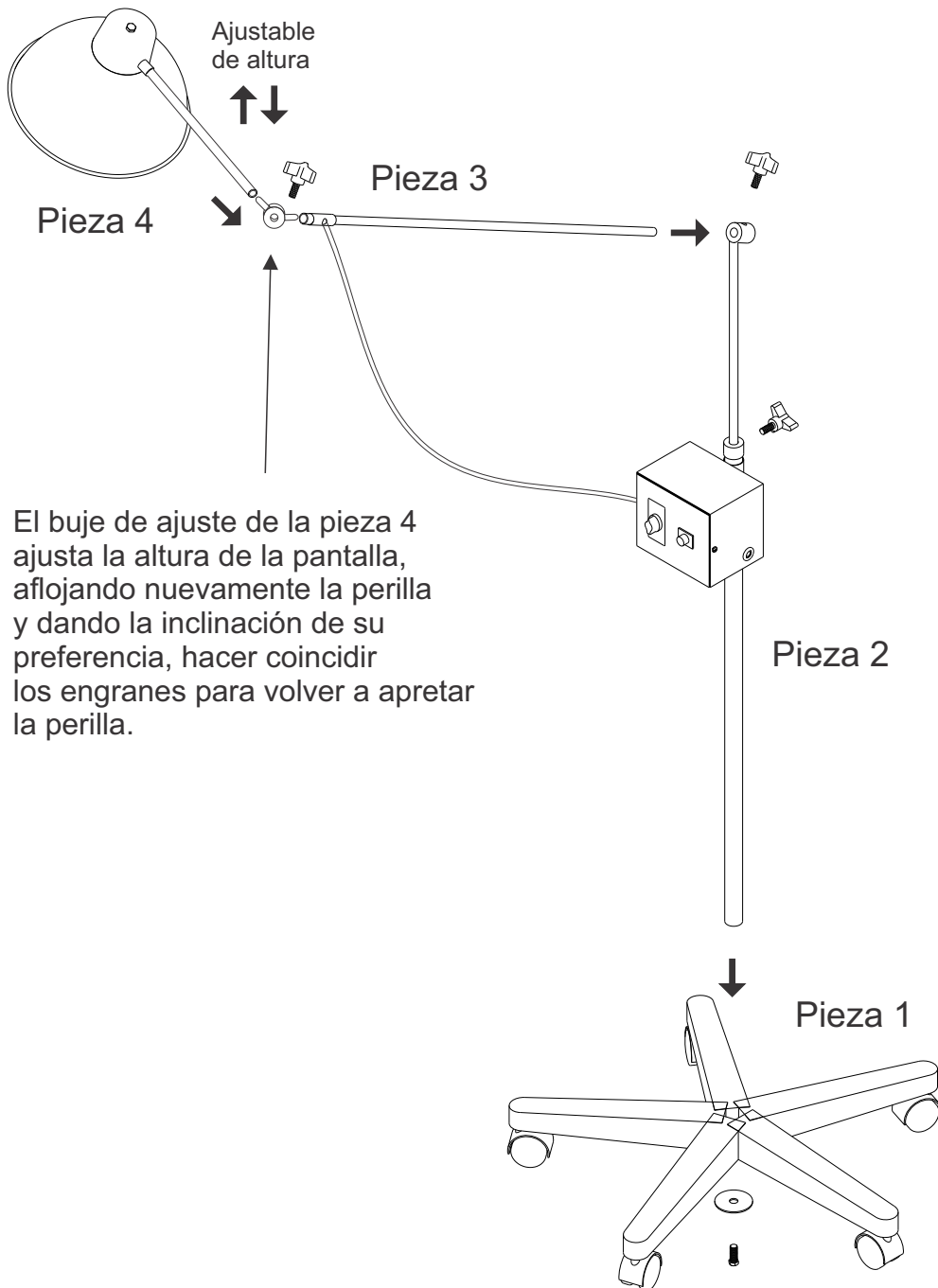

- 1 Unir la Pieza 2 en la parte superior de la Pieza 1 y apretar con tornillo por la parte inferior como se muestra en la ilustración.
- 2 Unir la Pieza 3 en la parte superior de la pieza 2 y apretar con la perilla de ajuste, posteriormente se ajusta la altura de la Pieza 2 como se muestra en la ilustración.
- 3 Unir la Pieza 4 en la parte superior de la pieza 3 y apretar con la perilla de ajuste, posteriormente se ajusta la altura de la Pieza 2 como se muestra en la ilustración.

